


 **APELEM**

PRÉSENTE

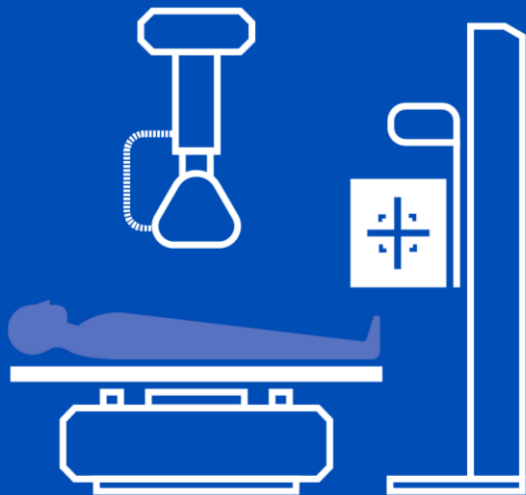


SALLES OS POUMONS

 **DMS**
IMAGING


CAMARGUE
SERIES

NOS SALLES D'OS POUMON

CAMARGUE series: Une gamme complète, polyvalente et performante pour l'ensemble des examens ostéoarticulaires

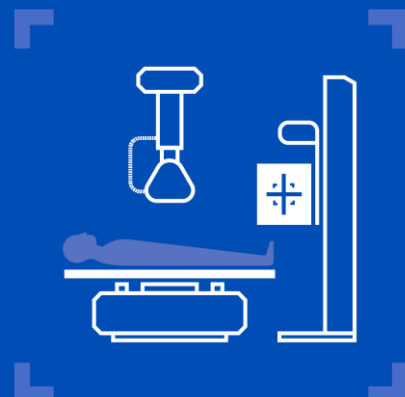


SALLE OS POUMON

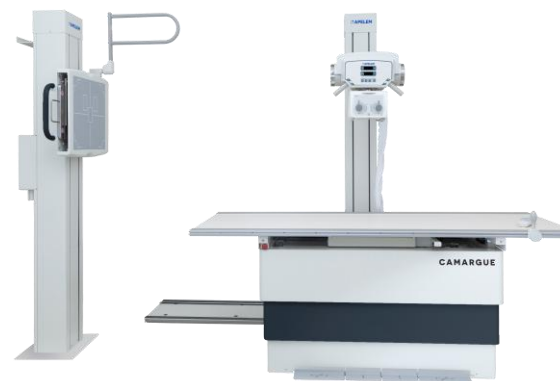

Compatible avec:

- ✓ tous les détecteurs de taille-cassette jusqu'à 43 x 43 cm
- ✓ Les capteurs plan fixe de taille-cassette 43 x 43 cm

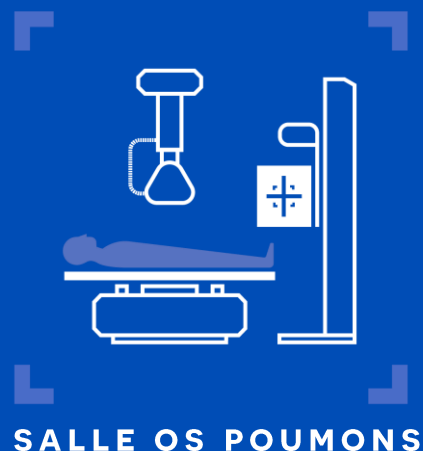


CAMARGUE series: 5 configurations pour répondre à l'ensemble des besoins



- **SYSTÈME BASIC – MANUEL**

RÉFÉRENCE: Z7J32003

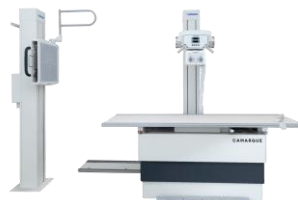

- **SYSTÈMES MOTORISÉS – COLONNE PORTE TUBE**

AUTO-TRACKING RÉFÉRENCE: Z7J32004

AUTO-TRACKING & AUTO-STITCHING RÉFÉRENCE: Z7J32005



- **SYSTÈMES MOTORISÉS – SUSPENSION PLAFONNIÈRE**

AUTO-TRACKING RÉFÉRENCE: Z7J32006

AUTO-TRACKING & AUTO-STITCHING RÉFÉRENCE: Z7J32007



SYSTÈME BASIC – MANUEL

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003



- **Système basic, manuel**
- **Empreinte au sol réduite**
- **Solution efficace, facile à utiliser et complète : table + potter mural + porte tube**
- **Colonne Porte Tube ou Suspension Plafonnière**
- **Table à hauteur fixe, en option variable**
- **Freins électromagnétiques**
- **Grilles oscillantes, non amovibles**
- **Mouvements colonne RT (rotation/transverse) en option**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003



Table

- Table à hauteur fixe par défaut : 75 cm
- Table à hauteur variable en option : 55 – 85 cm
- Mouvements du plateau multidirectionnels : 220 x 81 cm
- Charge max. par défaut: 250 kg (300 kg avec le panneau carbone)
- 1 poignée par défaut, autres accessoires en option
- Cellule (AEC) pour 3 chambres d'ionisation

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003



Potter mural

- Fixation au sol
- Mouvement vertical: 149 cm (38 – 187 cm)
- Cellule (AEC) pour 3 chambres d'ionization
- Pas de basculement possible



Colonne porte tube

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003

- Mouvement vertical: 150 cm (35 – 185 cm)
- Mouvement longitudinal: 185 cm
- Rotation autour de l'axe horizontal: +/- 120°
- Collimateur manuel par défaut (avec LED, laser, ruban, filtres additionnels en option)
- Fixation au sol par défaut, et au plafond (avec option RT: mouvement transverse + rotation atour de l'axe vertical)



CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32003

- Mouvement vertical: 150 cm (30 – 180 cm)
- Mouvements multidirectionnels
- Collimateur manuel par défaut (avec LED, laser, ruban, filtres additionnels en option)

Suspension plafonnière



SYSTÈMES MOTORISÉS – COLONNE PORTE TUBE

CAMARGUE

2 RÉFÉRENCES : Z7J32004 & Z7J32005



RÉFÉRENCE **Z7J32004**

SYSTÈMES MOTORISÉS – COLONNE PORTE
TUBE AVEC **AUTO-TRACKING**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32004



- Système motorisé – Auto-tracking
- Confortable et facile à utiliser
- Solution complète avec colonne porte tube
- Colonne: mouvement vertical motorisé
- Table à hauteur variable (45-90 cm)
- Potter mural - basculement en option
- Grilles haute résolution, fixes et amovibles
- Membrane avec affichage numérique
- Auto-tracking vertical table et potter mural

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32004



Table

- Table motorisée
- Table à hauteur variable : 45 - 90 cm
- Mouvements du plateau multidirectionnels avec freins électromagnétiques: 220 x 81 cm
- Charge max. par défaut: 250 kg (300 kg avec le panneau carbone)
- 1 poignée par défaut, autres accessoires en option
- Capteur anti-collision pour une utilisation sécurisée

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32004



- Fixation au sol
- Mouvement vertical: 153 cm (30 – 183 cm) + 20 cm à la demande
- 1 télécommande filaire incluse
- Basculement en option: 90° / -25

Potter mural

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32004



Colonne porte tube

- Console manuelle ou écran tactile 10"
- Collimateur manuel inclus, version automatique en option
- Mouvement vertical: 154,5 cm (33,5 – 188 cm) + 20 cm à la demande
- Mouvement vertical motorisé
- Mouvement longitudinal : 178 cm, + 110 cm à la demande
- Rotation autour de l'axe horizontal: 330°
- En option: mouvement transverse et rotation autour de l'axe vertical

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32004

- **Auto-tracking vertical entre la table et le potter mural**


- ☐ Références: table ou tube, interchangeable (car les 2 sont motorisés)
- ☐ Suiveur: table ou tube, interchangeable

- **Auto-tracking vertical entre le potteur mural et le tube**

- ☐ Référence: potteur mural (non motorisé)
- ☐ Suiveur: tube (motorisé)

- **Auto-tracking horizontal (auto-centrage) – En option**

- ☐ Référence: tube
- ☐ Suiveur: bucky (sélecteur) dans la table

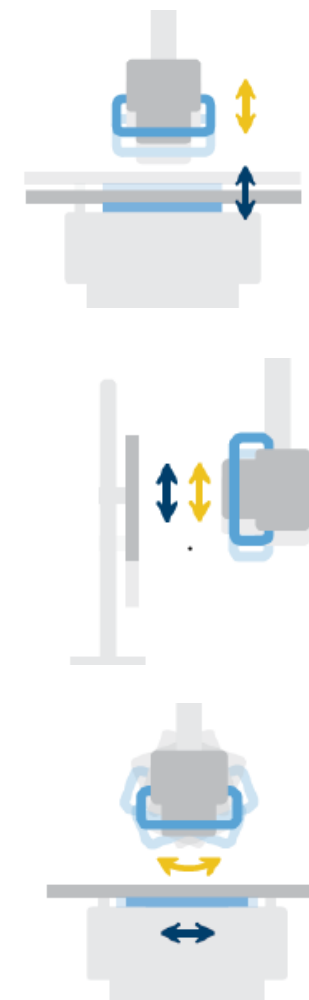

NOS SALLES D'OS POU MON



RÉFÉRENCE **Z7J32005**

SYSTÈMES MOTORISÉS – COLONNE PORTE
TUBE AVEC **AUTO-TRACKING & AUTO-
STITCHING**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005



- **Système motorisé – Auto-tracking & Auto-stitching**
- **Confortable et facile à utiliser**
- **Solution complète avec colonne porte tube**
- **Table à hauteur variable (45-90 cm)**
- **Potter mural – basculement en option**
- **Grilles haute résolution, fixes et amovibles**
- **Ecran tactile 10"**
- **Auto-tracking vertical table et potter mural**
- **Auto-stitching vertical**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005



Table

- Table motorisée
- Table à hauteur variable : 45 - 90 cm
- Mouvements du plateau multidirectionnels avec freins électromagnétiques: 220 x 81 cm
- Charge max. par défaut: 250 kg (300 kg avec le panneau carbone)
- 1 poignée par défaut, autres accessoires en option
- Capteur anti-collision pour une utilisation sécurisée

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005



Potter mural



- Fixation au sol
- Mouvement vertical: 153 cm (30 – 183 cm) + 20 cm à la demande
- 1 télécommande filaire incluse
- Basculement en option: 90° / -25
- **Mouvement vertical motorisé pour la reconstruction des membres inférieures (stitching)**
- **Position debout pour une procédure correcte et un bon confort pour le patient (stitching stand)**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005



Colonne porte tube

- **Ecran tactile 10"**
- Collimateur manuel inclus, version automatique en option
- Mouvement vertical: 154,5 cm (33,5 – 188 cm) + 20 cm à la demande
- Mouvement vertical motorisé
- Mouvement longitudinal : 178 cm, + 110 cm à la demande
- Rotation autour de l'axe horizontal: 330°
- En option: mouvement transverse et rotation autour de l'axe vertical
- **Rotation du tube autour de l'axe horizontal motorisé pour la reconstruction des membres inférieures (stitching)**

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005

- **Auto-tracking vertical entre la table et le potter mural**


- ☐ Références: table ou tube, interchangeable (car les 2 sont motorisés)
- ☐ Suiveur: table ou tube, interchangeable

- **Auto-tracking vertical entre le potteur mural et le tube**

- ☐ Référence: potteur mural (non motorisé)
- ☐ Suiveur: tube (motorisé)


- **Auto-tracking horizontal (auto-centrage) – En option**

- ☐ Référence: tube
- ☐ Suiveur: bucky (sélecteur) dans la table

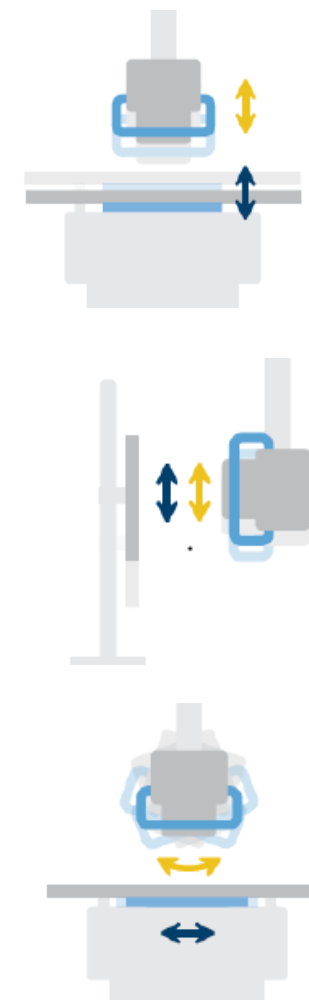

CAMARGUE

RÉFÉRENCE : Z7J32005

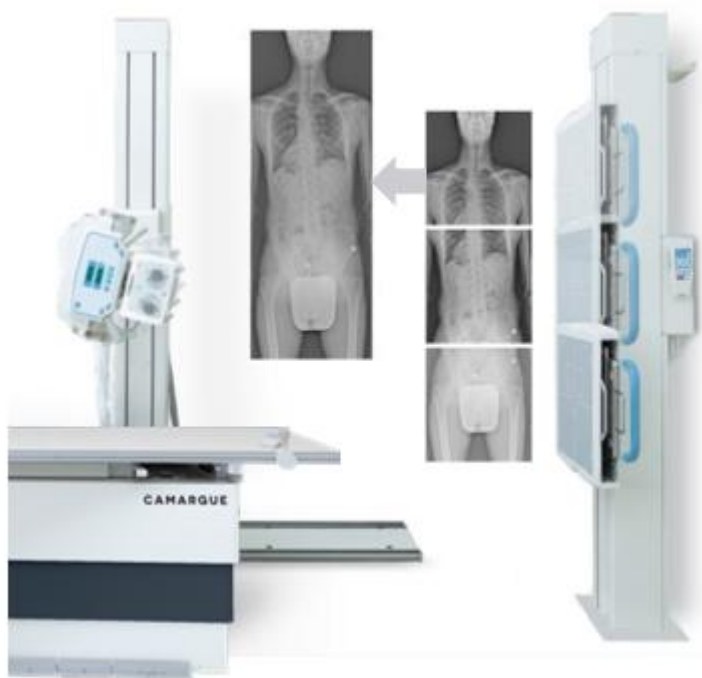

- **Auto-stitching vertical:** Rotation du tube autour de l'axe horizontal motorisé, mouvement vertical motorisé du potter mural, position debout (stitching stand)

Note: Si le **stitching sur la table** est nécessaire, l'option Auto-centrage doit être incluse.

SYSTÈMES MOTORISÉS – SUSPENSION PLAFONNIÈRE

CAMARGUE

2 RÉFÉRENCES : Z7J32006 & Z7J32007



CAMARGUE *RÉFÉRENCE : Z7J3200*



- **Système motorisé – Auto-tracking**
- **Confortable et facile à utiliser**
- **Solution complète avec suspension plafonnière**
- **Suspension: Mouvement vertical motorisé**
- **Table à hauteur variable (45-90 cm)**
- **Potter mural - basculement en option**
- **Grilles haute résolution, fixes et amovibles**
- **Membrane avec affichage numérique**
- **Auto-tracking vertical table et potter mural**

CAMARGUE


RÉFÉRENCE : Z7J32007



- **Système motorisé – Auto-tracking & Auto- stitching**
- **Confortable et facile à utiliser**
- **Suspension plafonnière**
- **Table à hauteur variable (45-90 cm)**
- **Potter mural - basculement en option**
- **Grilles haute résolution, fixes et amovibles**
- **Ecran tactile 10"**
- **Auto-tracking vertical table et potter mural**
- **Auto-stitching vertical** (Rotation du tube autour de l'axe horizontal motorisé, mouvement vertical motorisé du potter mural, position debout)

NOS SALLES D'OS POUMON

Exemples d'accessoires

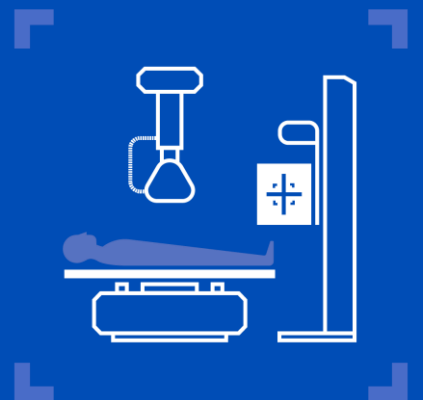

SALLE OS POUMONS



Poignée patient
pour potter mural



Matelas pour le patient



Porte cassette latéral
fixation panneau



Télécommande sans fil

DÉTECTEURS NUMÉRIQUES IRAY

Détecteur filaire : VENU 1717 X



- ✓ Détecteur digital RAD, 43x43 cm / 17x17"
- ✓ Filaire mais taille cassette
- ✓ Type de détecteur: a-Si avec scintillateur Csl
- ✓ Haute résolution: 139 μm
- ✓ Haute DQE: 69 % à 0 pl/mm
- ✓ Poids: 4 kg

Détecteurs wifi portable : MARS 1417 V3 & MARS 1717 V3



- ✓ Détecteur wifi digital 35x43 cm / 14x17" or 43x43 cm / 17x17"
- ✓ Type de détecteur: a-Si avec scintillateur Csl
- ✓ Distance entre le pixels: 150 μm pour le 1417 et 139 μm pour le 1717
- ✓ Poids: 3.3 kg et 4.6 kg
- ✓ Charge local: 100 kg et 135 kg
- ✓ Charge uniforme: 150 kg



DÉTECTEURS NUMÉRIQUES IRAY

- Tous les détecteurs sont gérés par le même logiciel d'acquisition
- Intuitif et facile à utiliser
- DICOM MWL, MPPS, Imprimer, Stockage, RDSR
- Module de reconstruction des membres inférieures inclus (stitching)
- Disponible sur ordinateur fixe, ordinateur portable ou tablette





ADRESSE > 9 Avenue du Canal Philippe LAMOUR - 30660 Gallargues-le-Montueux - FRANCE

TEL > +33 4 66 29 09 07 – www.dms-imaging.com